

LINHA PROBAC
PARA DIAGNÓSTICO
DE RESISTÊNCIA BACTERIANA

CARBAPENEMBAC
Metallo


PARA SER UTILIZADO COMO COMPLEMENTO AO PRODUTO CARBAPENEMBAC.

SE A CEPA TIVER RESULTADO POSITIVO, AS FITAS CARBAPENEMBAC METALO DEVEM SER UTILIZADAS PARA DIAGNÓSTICO DE METALOCARBAPENEMASES.

AS FITAS CARBAPENEMBAC METALO DEVEM SER IMPREGNADAS COM A SUSPENSÃO BACTERIANA FEITA NOS TUBOS COM SOLUÇÃO ESPECIAL DE EDTA PROBAC.

NO CASO DE BACTÉRIAS PRODUTORAS DE METALOCARBAPENEMASES, A FITA CARBAPENEMBAC DARÁ UM RESULTADO POSITIVO E A FITA CARBAPENEMBAC METALO, DARÁ UM RESULTADO NEGATIVO.

SE A CARBAPENEMASE É DE UM TIPO DIFERENTE DA METALOCARBAPENEMASES AS DUAS FITAS MOSTRARÃO UM RESULTADO POSITIVO.

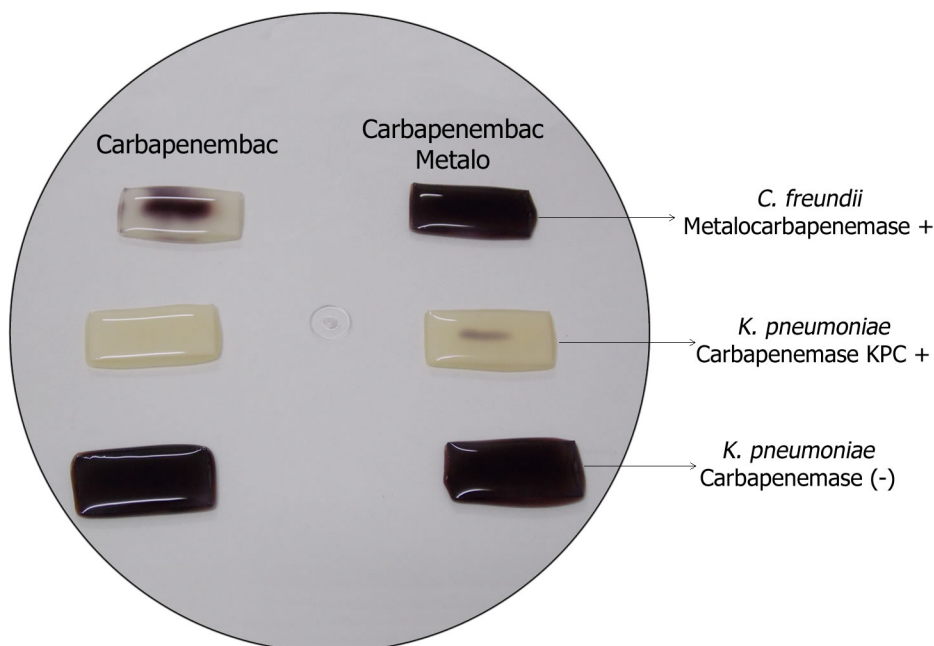

SOLICITE DEMONSTRAÇÃO DESTE
PRODUTO À EQUIPE PROBAC !